

Anaphylaxie :

Tout délai dans le traitement peut être fatal*

Sachez ce que c'est.

L'anaphylaxie est une réaction allergique grave qui peut être mortelle. Elle peut être déclenchée par certains types d'aliments (p. ex., les arachides et les fruits de mer), les piqûres d'insectes, les médicaments, le latex, l'exercice et d'autres causes inconnues.

Les symptômes suivants de l'anaphylaxie peuvent survenir quelques minutes ou plusieurs heures après l'exposition à un déclencheur de l'allergie :

BOUCHE : démangeaisons, enflure des lèvres et/ou de la langue

PEAU : démangeaisons, urticaire, rougeur, enflure

POUMONS** : essoufflement, toux, respiration sifflante

GORGE** : démangeaisons, sensation d'oppression, de constriction, enrouement

INTESTIN : vomissements, diarrhée, crampes

CŒUR** : pouls faible, étourdissements, évanouissement

* L'auto-injecteur EpiPen^{MD} n'est pas indiqué pour prévenir la mortalité associée à l'anaphylaxie.

† Certains de ces symptômes peuvent être mortels. AGISSEZ RAPIDEMENT!

Sachez quoi faire.

L'épinéphrine, le médicament contenu dans l'auto-injecteur EpiPen^{MD}, est le traitement de choix en cas de réaction allergique grave. En présence de n'importe lequel des symptômes ci-dessus, administrez EpiPen^{MD} immédiatement.

Bleu vers le plafond. Orange pour l'injection.

Mode d'emploi des auto-injecteurs EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD}.



- Saisissez l'auto-injecteur, le bout orange pointant vers le bas.
- Enlevez le bouchon de sécurité bleu en le tirant tout droit – ne le pliez pas et ne le tordez pas.



- Placez le bout orange contre le milieu de la cuisse externe.
- Avec un mouvement de balancement, poussez fermement l'auto-injecteur dans la cuisse jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
- Tenez l'auto-injecteur en place pendant 3 secondes complètes.



Couvre-aiguille intégré

- Le couvre-aiguille orange s'étend automatiquement après l'injection pour couvrir l'aiguille et assurer que celle-ci n'est jamais exposée.

Après l'administration d'EpiPen^{MD}, vous devez consulter un médecin immédiatement ou vous rendre à l'urgence. Durant les 48 heures suivantes, vous devez demeurer à proximité d'un établissement de santé ou à un endroit d'où vous pourrez au besoin composer le 911.

Les auto-injecteurs EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD} (épinéphrine) sont indiqués pour le traitement d'urgence des réactions anaphylactiques chez les patients qui présentent des risques accrus d'anaphylaxie, incluant les personnes ayant des antécédents en matière de réactions anaphylactiques. Le choix de la concentration appropriée est déterminé en fonction du poids du patient.

Les auto-injecteurs EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD} sont conçus comme un traitement de soutien d'urgence uniquement et non comme un remplacement de soins médicaux ou hospitaliers ultérieurs. Après l'administration, les patients doivent avoir immédiatement recours aux soins d'un médecin ou se rendre à la salle d'urgence la plus proche. Durant les 48 heures suivantes, ils doivent s'assurer de demeurer à proximité d'un établissement de santé ou d'un endroit d'où ils peuvent composer le 911. Afin de vous assurer que ce produit vous convient, veuillez toujours lire l'étiquette et suivre les instructions. Pour de l'information détaillée sur les mises en garde et précautions, les effets secondaires ainsi que la posologie et l'administration, consultez le feuillet de renseignements pour le consommateur.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour imprimer cette affiche, visitez le site pour consommateurs EpiPen.ca.




© 2017 Pfizer Canada inc., Kirkland (Québec) H9J 2M5 • Numéro sans frais : 1-877-EPIPEN1 (1-877-374-7361)
EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD} sont des marques déposées de Mylan, Inc. dont la licence exclusive a été accordée à Mylan Specialty, L.P.; société affiliée détenue en propriété exclusive; sous-titulaire, Pfizer Canada inc., Kirkland (Québec) H9J 2M5

D000059263
PP-EPI-CAN-0137-FR



MEMBRE DE
MÉDICAMENTS NOUVEAUX CANADA

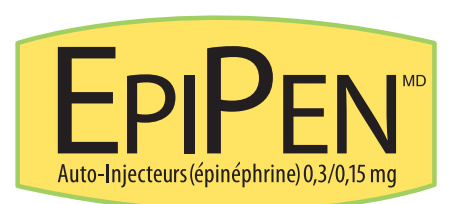

Éprouvé depuis plus de 25 ans.